


## Askina® DresSil, le nouveau pansement hydrocellulaire siliconé issu de la technologie alvéolaire B. Braun

B. Braun Medical lance Askina® DresSil, nouveau pansement hydrocellulaire siliconé auto-adhérent, indiqué dans le traitement des plaies aiguës et chroniques modérément exsudatives. Grâce à l'association de la technologie alvéolaire B. Braun aux propriétés du silicone, Askina® DresSil favorise la cicatrisation. Les alvéoles de tailles différentes, présentes à la surface de la couche de silicone souple au contact de la plaie, confèrent à Askina® DresSil une grande capacité d'absorption et minimisent la douleur lors du retrait, pour un meilleur confort du patient et du soignant.

### La technologie alvéolaire B. Braun au service de la cicatrisation

Askina® DresSil assure un bon management des exsudats. Les alvéoles de tailles différentes, présentes sur l'ensemble de la surface siliconée au contact de la plaie, favorisent une absorption contrôlée des exsudats par gradient de concentration vers la mousse hydrophile. Le passage rapide des exsudats vers la couche supérieure du pansement évite ainsi le risque de macération de la plaie. L'excès d'humidité absorbé s'évapore ensuite via le film semi-perméable, ce qui permet au pansement de régénérer sa propre capacité d'absorption.

Conformément aux recommandations européennes en matière de soin des plaies<sup>1</sup>, Askina® DresSil favorise la cicatrisation par le maintien d'un environnement humide.

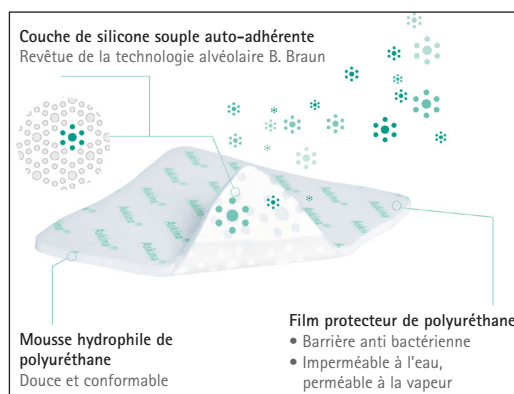

D'autre part, grâce à sa grande capacité d'absorption, Askina® DresSil peut rester en place en moyenne 2 à 3 jours, et jusqu'à 7 jours dans le cas d'une plaie peu exsudative, limitant ainsi le nombre de changements du pansement.

### Une auto-adhérence douce pour un retrait indolore

Associant les propriétés du silicone et les atouts de la technologie alvéolaire B. Braun, Askina® DresSil adhère en douceur aux berges de la plaie et respecte la peau périlésionnelle. Askina® DresSil assure ainsi un retrait en douceur, atraumatique pour le patient et garantissant une plus grande sérénité au soignant lors de la réalisation du soin.

*Après Askina® SilNet, interface siliconé pour la prise en charge des plaies fragiles, Askina® DresSil vient enrichir la famille des pansements siliconés de B. Braun Medical, pour un traitement efficace des plaies et un meilleur confort du patient.*

## Askina® DresSil en pratique

### ❖ Askina® DresSil est conformable

Il s'adapte à toutes les localisations de la plaie, y compris au niveau des articulations.

### ❖ Askina® DresSil existe en version Border

Ses bords siliconés assurent un maintien renforcé et une protection optimale (sans pansement secondaire), permettant au patient de prendre une douche facilement.

### ❖ Indications<sup>2</sup>

Plaies aiguës et plaies chroniques modérément exsudatives, telles que : brûlures de 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré, plaies traumatiques, ulcères du pied diabétique, ulcères de jambe, escarres, déchirures cutanées, sites donneurs de greffe, protection de peau fragilisée.

### ❖ Conseils d'utilisation


1- Nettoyer la plaie avec soin. Seule une plaie propre peut cicatriser : préparer le lit de la plaie à l'aide de la solution ou du gel Prontosan®.

2- Appliquer Askina® DresSil en laissant déborder de 2 cm.

3- Askina® DresSil reste en place en moyenne 2 à 3 jours, et jusqu'à 7 jours si la plaie est peu exsudative. En revanche, il sera changé tous les jours si elle est fortement exsudative.

### ❖ Askina® DresSil est conditionné par boîte de 10 unités

Produit remboursé sur la base des tarifs et prix limite de vente prévus sur la LPPR, dans les indications de plaies aiguës, sans distinction de phase, et des plaies chroniques en phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel.

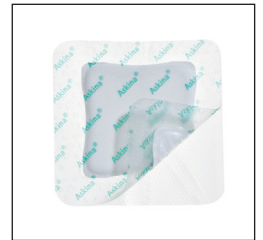

Article	Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Tarif LPPR
ASKINA® DRESSIL BORDER 10X10CM	9905033	4046963940874	1319063	26,66 €
ASKINA® DRESSIL BORDER 15X15CM	9905056	4046963940904	1347875	58,80 €
ASKINA® DRESSIL BORDER 15X20CM	9905062	4046963940928	1327370	78,08 €
ASKINA® DRESSIL 10X10CM	9905010	4046963940942	1319063	26,66 €
ASKINA® DRESSIL 10X20CM	9905027	4046963940966	1301347	52,37 €
ASKINA® DRESSIL 20X20CM	9905079	4046963940980	1354355	103,79 €

(2) Contre-indications : Askina DresSil est contre-indiqué sur les ulcères d'origine infectieuse ou provoqués par une infection fongique profonde ou des brûlures du 3<sup>ème</sup> degré.

## "Quand responsable rime avec durable"

Le Groupe B. Braun :

- développe une politique de développement durable concrète
- est spécialisé depuis près de 170 ans dans la conception, la production et la commercialisation de matériel médico-chirurgical et de médicaments
- est un groupe familial – 6<sup>ème</sup> génération – non coté en bourse
- possède 140 établissements dans 55 pays
- possède 45 sites de production dont 5 sites en France
- a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'€ pour un effectif de 41 000 collaborateurs
- a créé sa Fondation B. Braun en novembre 2008 : [www.fondation-bbraun.fr](http://www.fondation-bbraun.fr)

Pour toute information : [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Contact presse : Cécile Gillet-Giraud – 01 41 10 53 89 – [cecile.gillet-giraud@bbraun.com](mailto:cecile.gillet-giraud@bbraun.com)

B. Braun Medical SAS | 204 avenue du Maréchal Juin | 92 100 Boulogne Billancourt